

科莱瑞迪

核磁兼容后装转运床

- 核磁兼容
- 安全可靠
- 人性化设计
- 轻松简单



核磁兼容后装转运床

科莱瑞迪核磁兼容后装转运床针对临床需求设计，主要用于宫颈癌等妇科肿瘤的近距离放射治疗中病人的转移和固定。




- 核磁兼容，可安全应用于超导核磁环境
- 舒适性好
- 治疗与转运过程中体位保持不变
- 便于施源管的插植
- 配备免维护蓄电池供电
- 转运过程轻松便捷，减轻医护人员工作强度
- 电控系统被有效屏蔽，确保在3.0T超导核磁环境下可安全使用

核磁兼容



核磁环境

3.0T超导核磁环境下可安全正常使用。

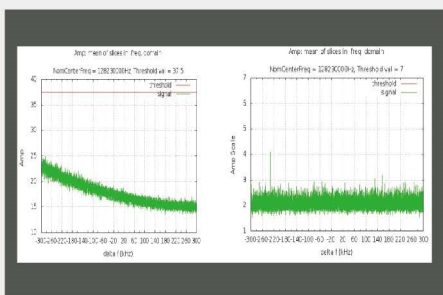

各频率信号均匀变化




模体图像清晰无伪影



安全材料

转移床板、脚托等使用玻璃纤维材料，满足MRI环境安全要求。

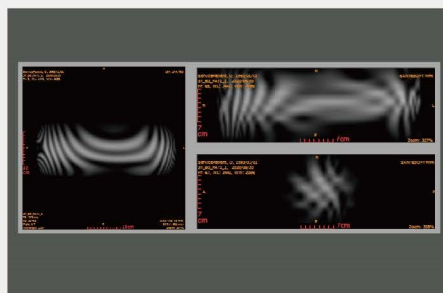

扫描质量

转运车靠近扫描床、转移床板进入扫描孔条件下，测试模体的扫描图像均匀连续变化。


● 安全可靠




电动升降，一键控制



两侧带护栏，防止意外坠落

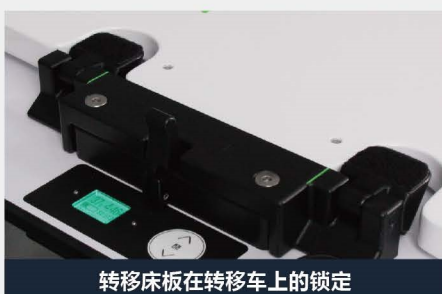

转移床板在转移车上的锁定

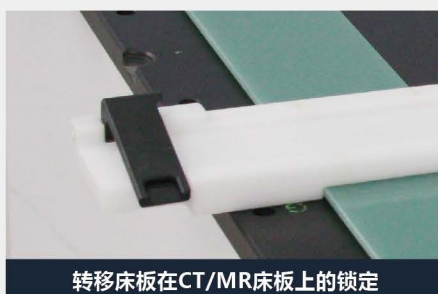

转移床板在CT/MR床板上的锁定

多种锁紧装置，确保在转移车和CT/MR床上的稳定



可使用真空袋或定位膜固定

专用体部真空袋带内置固定条，通过两端三点固定于转移底板上，确保病人的体位固定精度及舒适性，以及在转运和治疗过程中的稳定性和安全性。

● 人性化设计



镂空设计

移动底板在施源管固定区域有镂空设计，方便在插入施源器的过程中清洁液或者其他医疗垃圾直接落入下方的垃圾袋内。



使用方便

- ① 配备输液架，可安装于转移床任意一侧。
- ② 转移车底部两侧设计有挂钩，可挂人体排泄物收集袋等。


● 轻松简单




电动升降（高度62-87cm）
原装进口电机，更安全平稳。



德国进口医用车轮
贴近临床使用需求的车轮档位设计，一人轻松推动转弯。

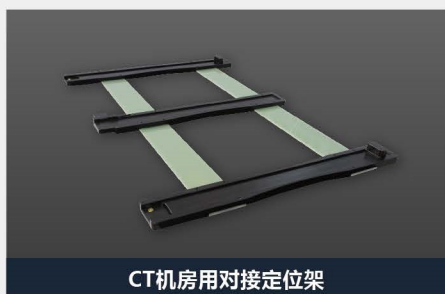

CT机房用对接定位架

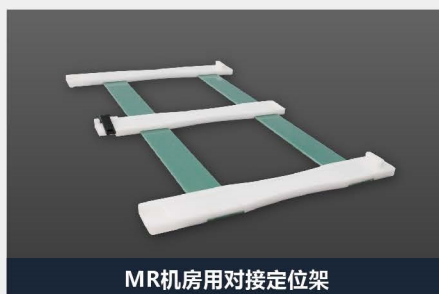

MR机房用对接定位架

过接定位架

转移底板采用三排滚珠轨道转移方式，操作时只需沿着轨道方向推拉，一人即可轻松快速完成转移。



脚托多维可调

- 玻璃纤维材质，在CT/MR上正常安全使用；
- 小腿支撑俯仰角25档可调；
- 小腿支撑高度3档可调；
- 脚托张开角度0-102°可调。



施源管夹紧装置

5轴360°旋转，可朝任意方向固定，适配各种型号后装治疗机，在患者转运、治疗过程中保持位置不变。